

Mit Sicherheit eine gute Wahl

Die ProFire® Serie von DeguDent bietet aufgrund ihres platzsparenden Designs Sicherheit und hohe Leistung auf kleinstem Raum. Die bewährten homogenen Heizspiralwicklungen sind durch eine Quarzglasröhre geschützt und sorgen für eine optimale Temperaturverteilung innerhalb der Brennmuffel. Das große Display lässt alle relevanten Informationen auf einen Blick erkennen. Ein multifunktionaler Drehgeber ermöglicht den direkten Zugriff auf relevante Brenndaten in verschiedenen Menüebenen. Selbstverständlich sind die Brenndaten auch grafisch darstellbar. Insgesamt 500 Programmspeicherplätze lassen keine Wünsche offen. Für den schnellen und direkten Zugriff sind die Programmfavoriten auf der Eingangsmaske ablegbar. Für Updates und Datensicherung steht ein USB-Port zur Verfügung, der Ihnen ermöglicht, Ihre individuellen Programme auch vom USB-Stick zu starten.



Sicher brennen

Auch bei extremen Brenntemperaturen können kleinste Temperaturschwankungen die Brennergebnisse in ihrer Qualität beeinträchtigen. Die Programmabläufe und Temperaturen der ProFire® Brennöfen werden deshalb zuverlässig elektronisch überwacht. Die Mess- und Regeltechnik basiert auf modernster Technologie und Elektronik, wodurch reproduzierbare optimale Brennergebnisse garantiert werden. Und selbst ein Stromausfall wird dank Netzausfallsicherung problemlos überbrückt.

Sicher ist sicher

Darauf können Sie sich verlassen: Die ProFire® Keramikbrennöfen stehen für Qualität „Made in Germany“ und sind zertifiziert nach weltweit gültigen Standards. Die internationale Gerätekonformität wurde durch ein unabhängiges Prüfinstitut testiert.

ProFire® press Brenn- und Pressofen ProFire® compact Brennofen

Profis gehen auf Nummer sicher

- Für alle Verblend- und Presskeramiken
- Sichere Brandführung
- Reproduzierbare Ergebnisse
- Direkter Programmszugriff
- Programme auf USB-Stick speicherbar
- 500 Programme



Die Verarbeitung von Dentalkeramiken mit ProFire® compact und ProFire® press

Ästhetische Versorgung mit System

Die Keramiköfen ProFire® compact und ProFire® press sind ideal auf die DeguDent Press- und Verblendkeramiken abgestimmt. Die exakte Brandführung garantiert beste Brennergebnisse, sowohl bei niedrigschmelzenden Keramiken wie Duceragold® Kiss, als auch bei hochschmelzenden Keramiken wie Duceram® Kiss. Auch Verblendkeramiken für Zirkonoxid, z. B. Cercon® ceram kiss oder Cercon® ceram love, lassen sich perfekt in den ProFire® Brennöfen verarbeiten.



40068/0902/DB
Stand: 2/2009

ProFire® compact (REF 53 5656 0001)

Gewicht: 23 kg
Tiefe: 43 cm
Breite: 27 cm
Höhe: geschlossen 46 cm,
offen 61 cm

ProFire® press (REF 53 5657 0001)

Gewicht: 27 kg
Tiefe: 43 cm
Breite: 27 cm
Höhe: geschlossen 56 cm,
offen 71 cm

Technische Daten

Spannungsversorgung: 230 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 1.400 W
Betriebstemperaturen: 4 - 40 °C
Max. Brenntemperatur: 1.200 °C
Ausschalter mit Thermosicherung (reversibel)

Lieferumfang

- 1 Gerätezuleitung, 1 Handbuch
- 1 Brenngutträger, 6 Brennstifte
- 1 Ofenpinzette
- 1 Brennsockel
- 1 USB Memory-Stick
- 1 Ablageplatte
- 1 Schlauch für Vakuumpumpe
- Nur für ProFire® press:
 - 1 Presssockel, 2 Pressstempel,
 - 1 Pressstempelhalter, 1 Druckluftschlauch

Zubehör

- ProFire® vac Vakuumpumpe (REF 53 5656 0100)
- Silberkalibrierset (REF D 03 532 803)

Technische Änderungen vorbehalten




DeguDent GmbH
Postfach 1364 · 63403 Hanau
www.degudent.de

Maße und Gewichte

ProFire compact
ProFire press

Keramikbrennöfen

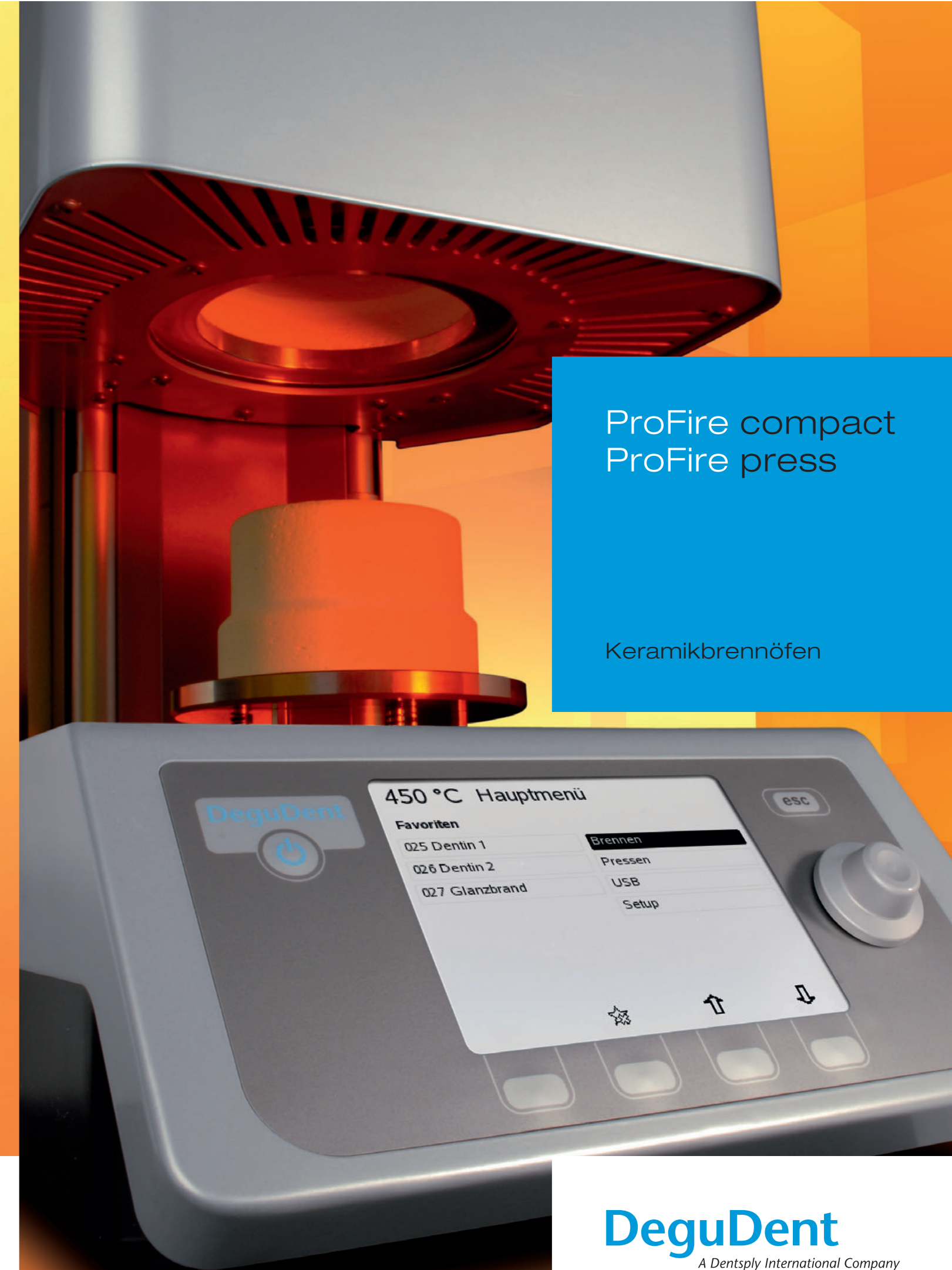

DeguDent
A Dentsply International Company

DeguDent
A Dentsply International Company