

Einfach robust.



4.

Degudent Kiss, die hochgoldhaltige Legierung mit Palladium, hat hervorragende Festigkeitswerte und ist einfach und sicher in der Verarbeitung.

- keine Langzeitabkühlung durch niedrigen WAK
- hohe Verzugsstabilität und dadurch ideal geeignet für große Implantatkonstruktionen
- schnelle Aufheizraten möglich
- Brücken jeder Spannweite
- helles Oxid

5.

BiOclus HT, die bewährte und robuste Bio-Legierung, wird seit Jahren erfolgreich verarbeitet. Die Legierung ist palladium- und kupferfrei und hat eine satt goldgelbe Farbe.

- sicher und einfach beim Vergießen
- sehr gutes Polierverhalten
- einfach und schnell beizbar
- breites Indikationsspektrum
- helles Oxid


6.

Keep it simple and safe, nach diesem Motto ist auch das Kiss-Farbrad entwickelt worden. Es ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Zuordnung der jeweiligen Kiss-Keramikmassen in Anlehnung an die V-Farben.

Durch die Einstellung der entsprechenden V-Farbe erscheinen in den unteren fünf Feldern automatisch alle weiteren Farbzusammenstellungen.

Der Kiss-Portionierer ist die logische Fortführung des Farbrades, welches im individuellen Schichtbereich 1:1-Mischungen, wie beispielsweise bei den Power Chromas, anzeigt. Durch den Einsatz des Portionierers ist ein definiertes Mischen zweier Massen mit absoluter Reproduzierbarkeit möglich.

Für weitere Informationen
oder Ihre Bestellung:
www.degudent.de

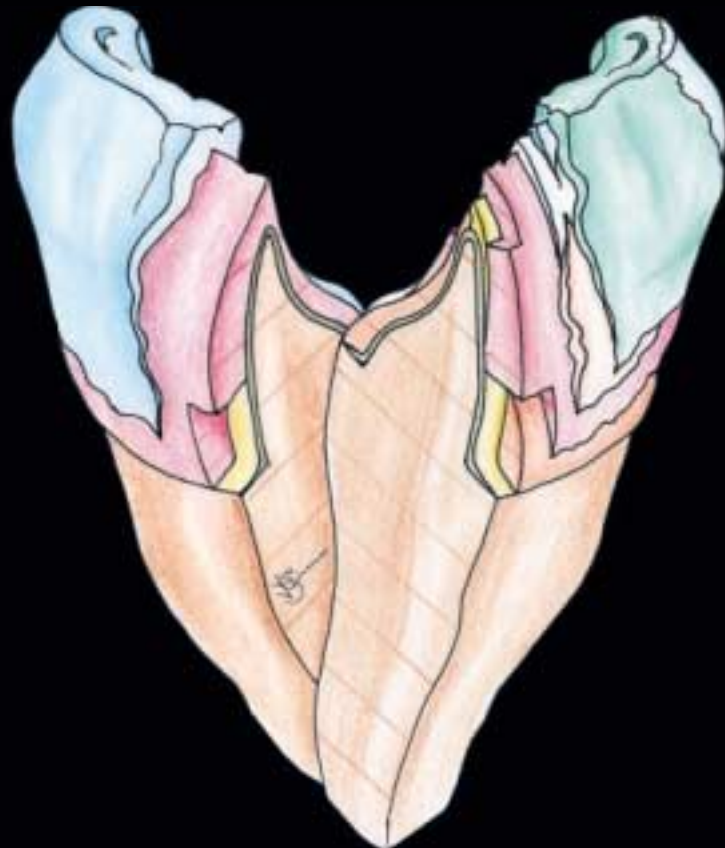

Neuer Kiss-Partner gefällig?
Reduziert, perfektioniert, einfach robust.

Duceram

Keep it simple and safe.



DeguDent


A Dentsply International Company

Reduziert, perfektioniert.



Sechs gute Gründe für das Kiss-Konzept

1.

 **Duceram Kiss** ist die neue hochschmelzende Verblendkeramik im konventionellen WAK-Bereich von 13,8 – 15,4 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$.

Mit nur noch 73 Keramikmassen setzt Duceram Kiss einen neuen funktionalen Standard. Und wer damit rechnet, dass die Schönheit darunter leiden muss, wird angenehm überrascht sein, denn die Farbsicherheit wurde erheblich verbessert. Aber wie lassen sich die marktüblichen 110 bis 120 Massen ohne Qualitätsverlust wesentlich reduzieren?

Mit 3 Hebeln:

Erstens durch eine neue Einfärbung der Dentinmassen und Opaker. Dadurch sind bei Basisschichtungen nach V-Farben keine zusätzlichen Intensivmassen mehr nötig. Zweitens durch eine zielgenauere Kategorisierung der Intensiv- und Inzisalmassen. Drittens mit einer neu entwickelten Didaktik, die Farben, Effekte und Werkstoffe intelligent kombiniert. Das neue Komplettsystem passt in einen Designkoffer.

Und damit schaffen Sie 100% der Arbeiten.

2.


Durch eine Optimierung der Farbpigmente ist es bei Duceram Kiss ein weiteres Mal gelungen, die Farbsicherheit in Anlehnung an die V-Farben erheblich zu erhöhen. Des Weiteren kann durch die Optimierung der Pigmente das Problem der Metamerie, der unterschiedlichen Farberscheinung bei unterschiedlichen Lichtquellen, wie z. B. Raumlicht oder Tageslicht, weitestgehend ausgeschlossen werden.

3.

Die Opalmasse, ein Baustein des natürlichen, lichtdynamischen Verhaltens der Restauration, wurde durch einen patentierten Herstellprozess entscheidend optimiert. Bei klassischen, hochschmelzenden Verblendkeramiken kann der Opaleffekt bei einer steigenden Anzahl von Bränden seine Wirkung verlieren. Bei Duceram Kiss bleibt er sichtbar erhalten.



Minimales Sortiment.

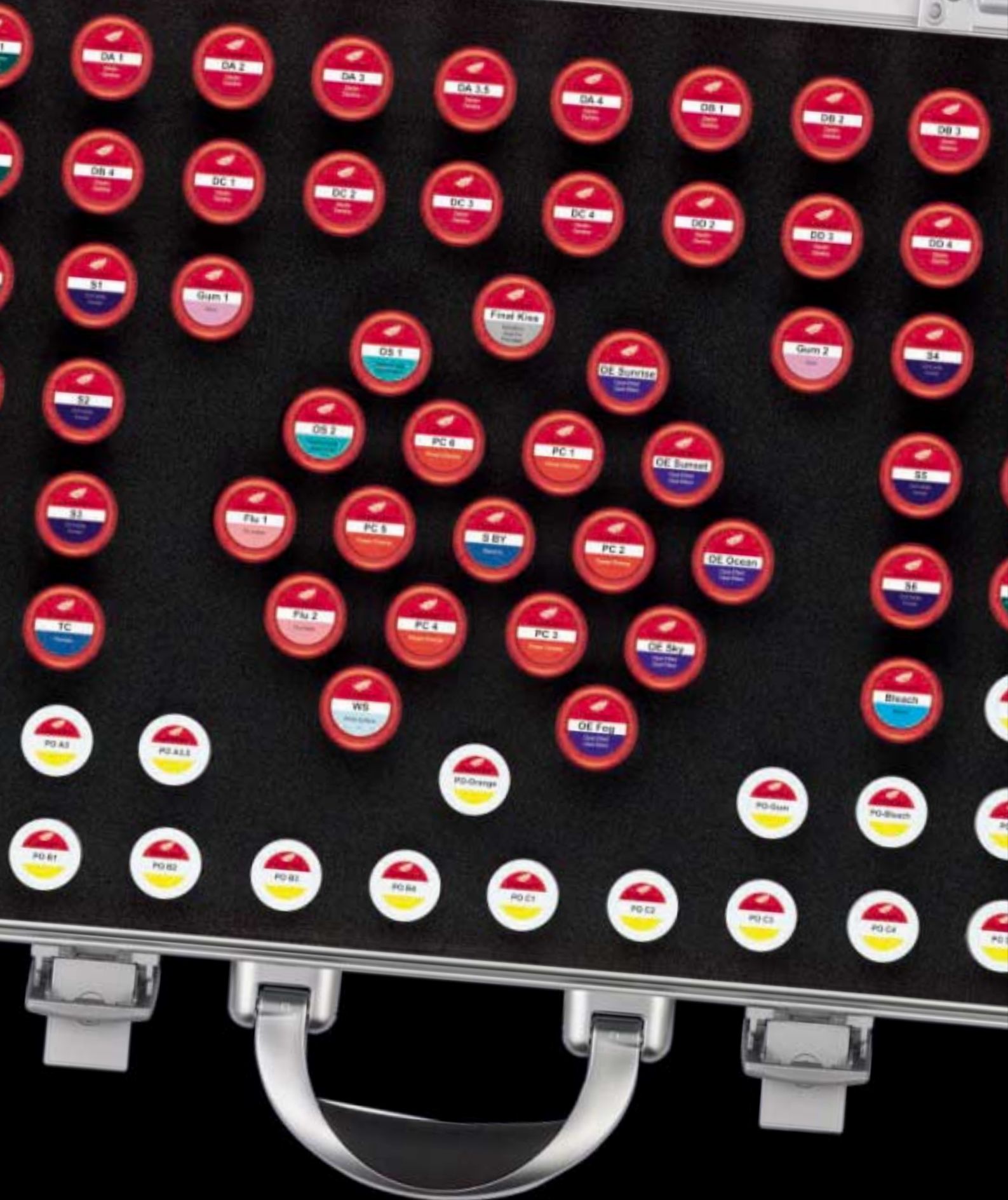

Maximale Ästhetik.



Duceram Kiss Opalfritte

Mit Duceram Kiss haben Sie die Möglichkeit, Ihr ganz persönliches Ästhetiklevel entsprechend Ihrer Laborstruktur festzulegen. Duceram Kiss setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen, die separat und auch eng verknüpft einsetzbar sind:

Ästhetik Line Base:

Die rationelle, wirtschaftliche Schichtung.

Die Opaker und Dentine sind bezüglich Farbton, Chroma, Helligkeit und Fluoreszenz sorgfältig aufeinander abgestimmt. Die V-Farben lassen sich hierdurch leicht und exakt reproduzieren, unabhängig von der Schichtdicke des Dentins. Darüber hinaus sind den V-Farben 6 Standardschneiden zugeordnet, um ein maximales ästhetisches Ergebnis zu erzielen.

Ästhetik Line Individuell:

Das Highend-Segment.

Durch definiertes und simples 1:1-Mischen der Massen haben Sie eine Vielzahl von zusätzlichen Farbnuancen zur Verfügung, mit denen Sie auch komplexe und schwierige Patientenfälle naturgetreu versorgen können. Der Natur auf der Spur hat DeguDent die natürlichen lichtdynamischen Effekte weiter perfektioniert.